




Sul Medical
Indústria e Comércio

HisteroFix[®]

MANIPULADOR UTERINO

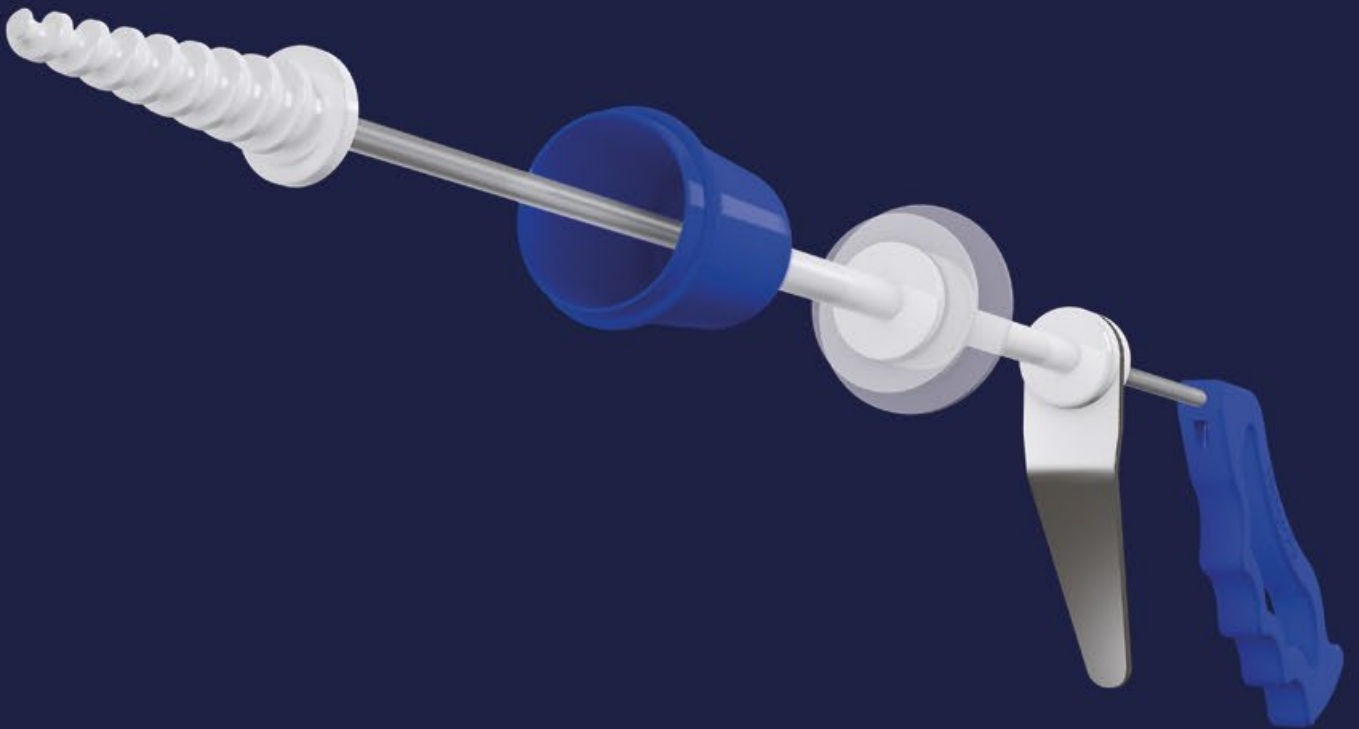

Imagens meramente ilustrativas.

NOSSO FUTURO

É ESTAR AO SEU LADO

HisteroFix®

O Manipulador Uterino HisteroFix® é um dispositivo de uso único, que permite a movimentação do útero, retração e elevação do colo uterino durante procedimentos cirúrgicos ou de diagnóstico.

Imagens Meramente Ilustrativas



PONTEIRA

- ▶ A ponteira em forma de rosca facilita a introdução do dispositivo, dispensando a prévia dilatação do colo vesical.
- ▶ 4 tamanhos de ponteiras, possibilitando ao cirurgião a escolha mais adequada ao tamanho do útero.



100mm 85mm 70mm 55mm

MODELADOR VAGINAL

- ▶ Este acessório facilita a confecção de sutura e fechamento da cúpula vaginal, após histerectomia.



MANIPULADOR UTERINO

LIMITADOR DE PROGRESSÃO DA PONTEIRA

- ▶ Diminuindo o risco de lesões uterinas.



COPO

- ▶ Copos que acoplam à cúpula uterina, moldando e fixando o útero para manipulação.
- ▶ Copos com coloração azulada, melhorando a visualização durante colpotomia.
- ▶ 5 opções de copos: 4 fechados e 1 aberto.



F43mm F38mm F35mm F33mm A35mm

GUIA DE CORTE

- ▶ Para procedimentos com colpotomia.



SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DO COPO

- ▶ Sistema independente, permitindo a inserção e retração do copo durante o procedimento.

ANÉIS DE VEDAÇÃO

- ▶ Excelente vedação, impedindo a perda do pneumoperitônio.

EMPUNHADURA

- ▶ Ergonomia Premium, facilitando a manipulação durante procedimento.



POR QUE ESCOLHER O HISTEROFIX®?

- ▶ Introdução atraumática.
- ▶ Manipulação uterina eficaz e segura.
- ▶ Maior acesso à anatomia pélvica.
- ▶ 4 tamanhos de ponteiras.
- ▶ 5 opções de copos.
- ▶ Acessório opcional: Modelador vaginal.
- ▶ Excelente vedação da cúpula vaginal durante procedimentos.
- ▶ Não necessita dilatação do colo do útero.
- ▶ Fornecido inteiramente montado e pronto para uso.
- ▶ Leve e de fácil manuseio.
- ▶ Não contém látex.



NOSSO FUTURO

É ESTAR AO SEU LADO

clique para
acessar

www.sulmedical.com



(49) 3323-2300
vendas@sulmedical.com
www.sulmedical.com

SulMedical Indústria e Comércio LTDA

AV. Nereu Ramos, 2155D, sala 01 e 02
Bairro Universitário / Chapecó - SC / Brasil / CEP: 89812-111
Indústria Brasileira

Registro ANVISA: 80569810006

SulMedical Indústria e Comércio LTDA. Todos os direitos reservados. Reservamos o direito de fazer alterações.